

# Hemomat - K6

## Färbeautomat



### Spezifikation

- ▶ Halter für bis zu 30 Objektträger
- ▶ 6 Küvetten (Standard) mit Deckel (500 ml)
- ▶ 1 Wasserspülstation mit druckgeregeltem Wasserzulauf (optional)
- ▶ 1 Trockenstation von 40°C bis zu 80°C einstellbar (optional)
- ▶ 25 Färbeprogramme speicherbar mit bis zu je 30 Schritten

### Hemomat-K6 für 30 Objektträger\* Der optimale Färbeautomat für die

#### Hämatologie

Blut und Knochenmark

- May-Grünwald
- Giemsa
- Wright
- Pappenheim
- Leishman

#### Bakteriologie


- Gram-Färbung
- Fluoreszenzfärbung und Kaltfärbung von *Mycobacterium tuberculosis*

Der Hemomat-K6 ist ein vollautomatischer Färbeautomat für die Hämatologie und Bakteriologie. Mit sechs Stationen ist der Hemomat-K6 einfach in der Anwendung und Wartung.

Objektträgerhalter und Küvetten sind für 8 oder 30 Objektträger erhältlich.

- ▶ Als optionales Zubehör bieten wir
  - ▶ Trockenstation von 40°C bis zu 80°C einstellbar.
  - ▶ Wasserspülstation mit druckgeregeltem Wasserzulauf.
- ▶ Die Programmierereinheit - mit „Touchscreen“ für einfache Programmierung - sorgt für individuell einstellbare Färbeschritte in den Färbe-, Spül- und Trockenstationen.
- ▶ Programmsicherheit durch Passwort geschützten Zugang.
- ▶ Der Verbrauch an Färbereagenzien ist beim Hemomat-K6 sehr gering, da durch den neuen Typ Objektträgerhalter kaum Verschleppung der Reagenzien passiert.


- ▶ Die Agitation (Eintauchzeit) und die Abtropfzeit zur weiteren Minimierung der Verschleppung von Reagenzien ist frei wählbar.
  - ▶ Der Hemomat-K6 kann durch Vor- und Rücklauf des Objektträgerhalters eine große Anzahl verschiedener Färbungen durchführen.
  - ▶ Auf Grund der geringen Größe passt der Hemomat-K6 unter jeden Abzug.
  - ▶ Der Hemomat-K6 ist eine zeitsparende und wirtschaftliche Lösung für das Färben in der Hämatologie und Bakteriologie.
- \* **NEU:** Für geringe Volumen von Reagenzien (160 ml) und bis zu 8 Objektträger kann der Hemomat-K6 mit dem „8 Objektträger Zubehör-Kit“ bestückt werden.

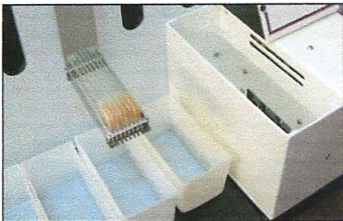

Halter für bis zu 8 Objektträger mit den Reagenz-Bädern die ein Volumen von je 160ml haben.



Wählen Sie ein vordefiniertes Programm oder erstellen Sie Ihr eigenes Programm mit Hilfe des Touchscreens.

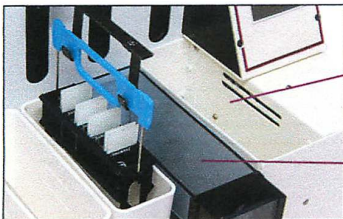

Trockenstation

Wasserspülstation

Produktbezeichnung	Bestellnummer
Hemomat-K6	106 106

**Maße (BxTxH):** 46 x 28 x 35 cm

**Gewicht:** ca. 10 kg

**Sicherheit:** CE/IVD geprüft

**Spannung:** 208-240V 50Hz oder 100-1 27V 60Hz

