

# ABDOS Elegant Pipette: leicht, sicher & zuverlässig

## Vollständig autoklavierbare Mikropipette für den Laboralltag

Die Elegant Pipette von unserem Partner ABDOS ist eine vollständig **autoklavierbare**, ergonomisch gestaltete Mikropipette, die ein hohes Maß an **Genauigkeit** und **Präzision** bietet. Die Pipette ist ultraleicht und erfordert nur eine **geringe Pipettierkraft**. Die weiche Volumeneinstellung und die sanfte Kolbenbewegung ermöglichen ein müheloses und sicheres Pipettieren. Jede Pipette wird mit einem individuellen CE-Prüfzertifikat geliefert und ist gemäß ISO 8655 in Verbindung mit ISO 13485 kalibriert.



Die **Elegant Pipette** ist in zwei Varianten erhältlich:


- Volumen **2 – 20 µl**, einstellbar in 0,2 µL-Schritten
- Volumen **20 – 200 µl**, einstellbar in 2,0 µL-Schritten

Beide Pipetten sind durch ein mitgeliefertes Tool kalibrierbar und können durch verschiedenfarbige Kappen leicht unterschieden werden.

Weiterer Laborbedarf unter <https://www.biomed.de/produkte/laborbedarf/>

# Zubehör: Pipettenspitzen & Pipettenhalter

## Pipettenspitzen in einer praktischen & wiederverwertbaren Halterung

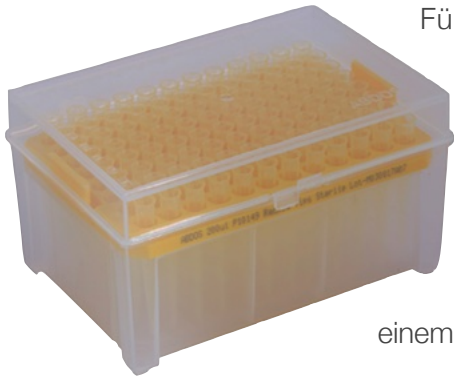

Für eine Erleichterung im Laboralltag sorgen die praktischen und wiederverwendbaren **Pipettenspitzenhalterungen** mit den bereits vorgesteckten **CE & IVD zertifizierten** Pipettenspitzen. Die Halterungen sind sauber in einer bis zu **zehnmals autoklavierbaren** Box verstaut. Die Pipettenspitzen können sicher auf die Elegant Pipette oder andere handelsübliche Mikropipetten aufgesetzt werden. Sie schließen dicht ab und sind absolut auslaufsicher. Außerdem sind die Pipettenspitzen mit einem speziellen Filter ausgestattet, der **Kontaminationen verhindert**.

Sie sind aus **hochreinem Polypropylen (PP)** und gemäß US FDA 21CFR **hydrophob**. Sie sind **frei** von **DNase** und **RNase**, **Endotoxinen**, **ATP & Pyrogenen**, sowie **humaner DNA**, außerdem sind sie frei von **Schwermetallen**, **Naturkautschuk** und **hemmenden Weichmachern**, sowie gemäß EU Richtlinie 2011/65/EU **ohne RoHS**.

Die Pipettenspitzen und die durchsichtige Box entsprechen der ISO 9001:2015 in Verbindung mit ISO 13485:2016. Die Pipettenspitzen sind in den Größen **2 - 20 µl** und **2 - 200 µl** erhältlich.



## Für Ordnung & Sauberkeit im Labor: Pipettenständer & -Karussell

Für einen ordentlichen Arbeitsplatz sorgen wahlweise der praktische Pipettenständer oder das platzsparende Pipettenkarussell.



### Pipettenständer

Der praktische Pipettenständer aus Acrylglas bietet Platz für bis zu **fünf Pipetten**. Er ist leicht zu reinigen und hat einen sicheren und festen Stand.

### Pipettenkarussell

Gönnen Sie Ihren Pipetten etwas Spaß nach der Arbeit mit dem drehbaren Pipettenkarussell. Bis zu **sechs Pipetten** können im platzsparenden Pipettenkarussell gestaut werden. Das Karussell hat einen festen Stand und lässt sich sanft und gleichmäßig drehen. Außerdem ist es **autoklavierbar**.



Weiterer Laborbedarf unter <https://www.biomed.de/produkte/laborbedarf/>